


oserio®  
Health is Beautiful

## oserio 產品使用說明書—MTG-305系列 BTG-365系列

### 產品各部名稱

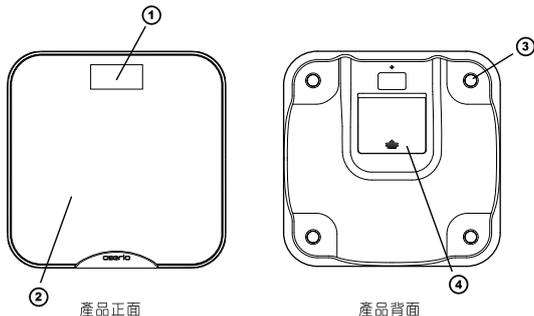


① LED 顯示螢幕

② 腳踏秤盤

③ 支撐腳座

④ 電池盒蓋

### 健康管理APP下載

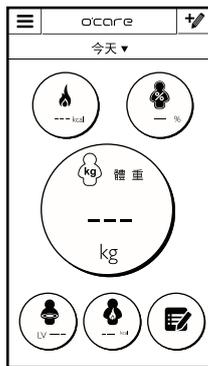

Android



iOS


輕鬆減重小幫手




溫馨提醒：

• 如何進行連線？請參考「連線操作說明」

### 電池更換方式

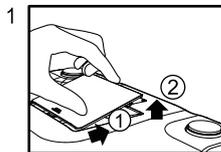

掀開電池蓋

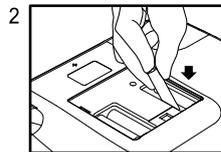

裝入4顆  
AA 電池  
(3號電池)

注意：

① 推開電池蓋


② 拿起電池蓋

• 請勿將鹼性電池與一般乾電池混合使用

• 請勿將新舊電池混合使用

• 電池放入電池盒時請注意電池極性應正確

# 產品操作說明

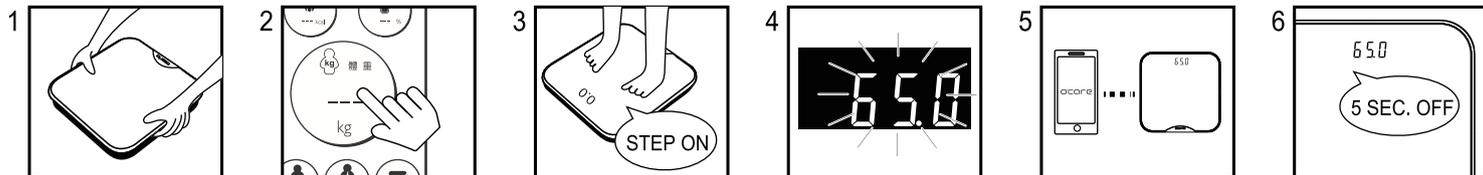

1 將秤體放置平坦地面，機器進行校正準備

2 開啟 ocare APP並點選進入體重球功能

3 此時可以上秤測量，並避免不必要之身體晃動(量測中請勿下秤)

4 量測完成(重量鎖定並閃爍)

5 此時手機與秤體進行無線傳輸之動作


6 傳輸完畢，顯示體重5秒後自動關機

⚠ 進行量測前，請將產品放在平坦地面，以免量測不準確。

說明：

- 體重量測完成後30秒以上未進行傳輸連結→自動關機

## 錯誤訊息顯示表

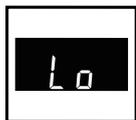

電池低電量顯示，  
請更換電池



過載或一分鐘內秤  
重不穩定，請重新  
在秤體上站穩勿晃  
動以進行測量



手機發送至秤體訊  
息資料有誤，請重  
新量測傳輸，如一  
再發生此狀況，請  
洽客服人員，由專  
人為您服務



秤體發送至手機訊  
息資料有誤，請重  
新量測傳輸，如一  
再發生此狀況，請  
洽客服人員，由專  
人為您服務

### 低功率射頻電機設備警語

「依據低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。




前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

## 使用安全注意事項

### 警告：

- 請勿讓幼童接觸本產品。
- 請勿在產品上跳躍。
- 請勿踩在主機邊緣或顯示螢幕上。
- 請勿讓體障人士在無人陪伴協助下使用本產品，請利用扶手輔助支撐，或他人協助下，才可站到本產品上。
- 請勿拆解、自行修改或改裝本產品結構或顯示螢幕。
- 請使用本產品指定的電池規格，切勿將電池電極反插。
- 長時間未使用本產品時(三個月或以上)，請卸下電池。
- 雙腳潮濕或磅秤表面潮濕，請勿踩踏使用，以避免滑倒造成危險。
- 若開機後無螢幕顯示畫面，請先檢查是否為電池無電量。
- 請勿將產品放在可能受潮的高度潮濕環境，或受到陽光直射、空調冷氣直吹、高溫的火焰暖爐旁。
- 測量前請先脫鞋，再站上本產品。
- 請勿用水清洗或苯、汽油、塗料稀釋劑、酒精或以其他揮發性溶劑擦拭本產品。
- 本產品為精密儀器，請勿重摔、震動或以外力撞擊。
- 本產品和廢棄電池的處理，應遵循國內對電子產品的處理規定。
- 請勿將本產品放置於非平整環境使用(如地毯或席墊等)。在非平面情況下可能導致產品無法準確測量，故請置放於平整地板上量測。
- 請勿將本產品存放在以下環境中
  - 高溫、高濕、有灰塵、濕潤、陽光直射處
  - 強烈撞擊、震動或表面不平整的地方
  - 擺放化學品或具腐蝕性氣體的環境中

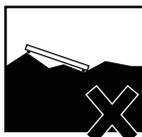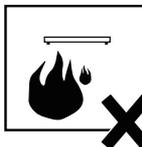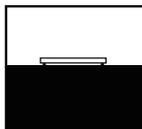

## 存放與保養


### 存放注意事項：

- 請存放在陰涼平整的地面。
- 避免放置在進出走道上，以免不小心絆倒行人。
- 不可直接浸泡到水。
- 遠離高溫、潮濕，直接日曬與多塵地方。
- 避免與化學材料或具腐蝕氣體存放一起。
- 長時間不使用時(三個月以上)，請取出電池裝入外盒收存。



### 保養小叮嚀：

- 每日使用前請用乾布擦拭，常保機器潔淨如新。
- 使用乾淨軟布擦拭秤盤與螢幕面板，必要時可使用擰乾後的布擦拭機器，最後再以乾布抹乾即可。
- 請勿使用揮發油、清潔劑或汽油來擦拭機器。
- 避免使用粗糙、有沾黏異物的布擦拭機器，以防秤盤與螢幕面板刮傷。
- 使用時，若發現機器沾到水，請儘快用乾布擦拭乾淨，避免讓水滲入機心，影響準確度。

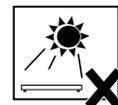

## 產品規格

電源	4顆 AA(3號)電池	產品重量	2.0kg	
產品尺寸	機體：320(長) x 320(寬) x 31(高) mm			
適用環境	使用溫度： 5 ~ 35℃	使用濕度：	30 ~ 85%RH	
保存環境	保存溫度： -20 ~ 60℃	保存濕度：	10 ~ 95%RH	
秤重準確度	5~40kg : ±0.4 kg, 40~150kg : ±1%			
顯示項目	重量： 5~150kg, 遞增數值(解析度) : 0.1kg			
	BMI範圍：	≤ 18.4	18.5~23.9	24~26.9
	偏瘦	正常	偏胖	超胖
附件	產品說明書(保固卡)、連線操作說明			

進口商: 啟德電子股份有限公司  
地址: 台中市大里區國中路103號  
產地: 中國  
服務電話: (04)24079943 0800-203766



廢電池請回收